

Sicherheit im Blick

MOBELI® - immer eine runde Sache.



MOBELI®
Das innovative Original.



Die Sicherheit im Blick.

Mobile Hilfen

MOBELI® - kleine Helfer, große Wirkung.

Unsere mobilen Klemmhilfen unterstützen Sie in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Rasierapparat, Fön oder Bürste, einfach einklemmen, und in die gewünschte Position bringen - fertig.

Den hilfreichen Brausepositionierer gibt es wahlweise mit flexiblem Schwenkarm. Die mobilen Teleskopspiegel - optional mit LED-Licht - sind schnell und einfach platziert. Sie ermöglichen auch im Sitzen einen Blick in den Spiegel oder erweisen sich als sehr hilfreich beim Katheterisieren oder zur Stoma-Kontrolle.

Wenn Ihre Gehstöcke zu oft auf dem Boden liegen, dann wird der mobile Duo-Gehstockhalter Ihnen das Leben deutlich erleichtern können. Er kann an der Wand oder auf bzw. unter der Tischplatte angesaugt werden. Immer schnell und sicher, immer ohne Werkzeug.



MOBELI®	Best. Nr.
Klemmhilfe mit Schwenkarm	14992 04 S
Mobiler Teleskopspiegel (80 cm ausziehbar)	14002 09 S
LED-Micro Lampe mit Clip (inkl. 50 Std. Batterie)	14092 09
Brausepositionierer	14002 02 S
Brausepositionierer mit Schwenkarm	14992 02 S
Duo-Gehstockhalter	14002 06 S

9



Der Name ist Programm: Sicht- und Spritzschutz; sehr beliebt und ideal bei der Pflege. Der Gelenkarm ist nach oben schwenkbar oder lässt sich, bei vertikaler Befestigung zur Seite schwenken. Die integrierte Bremse hält den Mobeli Arm selbsttätig in der gewünschten Position. Der 720-1050 mm lange 3-teilige elastische Spritzschutzarm wurde so konzipiert, dass auch beim Auflehnen keine starken Hebelkräfte auf die tragende Wand einwirken.



MOBELI®	Best. Nr.
Sicht- und Spritzschutz Gelenkarm (ohne Vorhang)	14002 05 S
Vorhang (Breite/Länge): 1200 x 800mm	140612 08

10

Stützsysteme

Sicherer Halt. Da wo Sie ihn brauchen.

Ruck-Zuck festen Halt ohne Bohren. Sie positionieren das QuattroPower-Stützsystem, legen die Kipphebel um, fertig. An allen planen und porenreichen Flächen steht Ihnen nun eine zuverlässige Aufstehhilfe zur Verfügung.

Das Stützsystem QuattroPower Stütz mit 4 Saugtellern ist so konstruiert, dass es die auf die Wand wirkenden Hebelkräfte beträchtlich reduziert. Es kann sogar an befestigten Hohlräumen befestigt werden und hat eine Nennlast von bis zu 80 kg. Teure Umbauten zur Wandverstärkung, damit Haltegriffe zum Anschrauben befestigt werden können, entfallen.



MOBELI®	Best. Nr.
QuattroPower Stütz	14002 65 S
QuattroPower Stütz mit Griff	14002 66 S
QuattroPower Wanne	14002 61 S
QuattroPower Wanne mit Griffverlängerung	14002 62 S

11




Optimiert für die Badewanne: Das Mobeli Stützsystem QuattroPower Wanne eignet sich hervorragend für den Wannenein- und ausstieg. Es hält hohen Zug- und Stützbelastungen stand. Greifen Sie mit beiden Händen vor dem Ein- oder Ausstieg die Griffstange und lassen diese erst wieder los wenn Sie sicher sitzen bzw. fest stehen. Übrigens: Der QuattroPower Wanne kann auf der Aussen- oder Innenseite angebracht werden und hält auch unter Wasser.



12



MOBELI® - mitten im Leben. Mit Sicherheit.

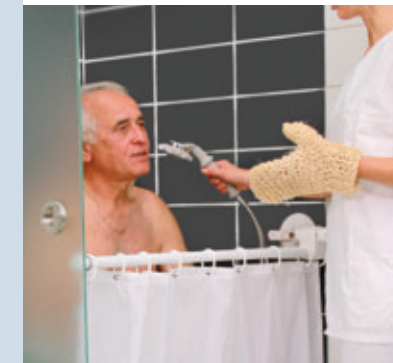

MOBELI®
10 Jahre

Mobile Haltegriffe - genial einfach und sicher.

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachgeschäft.

ROTH®

D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23

www.mobeli.de

Sie erreichen uns unter info@mobeli.de

10/2010 Änderungen vorbehalten.

Mobile Haltegriffe

Mobil leben. Barrieren überwinden.

Das patentierte System Mobeli von ROTH ist eine praktische Hilfe, die sich im Alltag von behinderten und älteren Menschen seit 10 Jahren täglich bewährt hat.

Die mobilen Griffe sind schnell und komfortabel anzubringen und ebenso leicht wieder zu lösen. Die beiden Saugteller mit je 120 mm Durchmesser einfach auf eine plane, porendichte Fläche andrücken, die Vakuum-Kipphebel umlegen - fertig.

Alle Griffe sind hervorragend verarbeitet und vom TÜV-Süd geprüft worden, haben eine große Haftkraft und sind in unterschiedlichen Längen erhältlich. Hilfreiches Zubehör, wie z.B. Brausepositionierer, Doppelhaken, Wannverkürzer oder Tablett sowie eine Vielzahl weiterer kleiner „Helfer“ komplettieren unser System Mobeli auf sinnvolle Weise.

MOBELI®	Greiflänge mm	Nennlast	Best. Nr.
2-Hand-Griff	210	75 kg	14002 25 S
2-Hand-Griff	350	70 kg	14002 26 S
2-Hand-Griff	650	70 kg	14002 27 S
2-Hand-Teleskopgriff	220-345	65 kg	14002 21 S
2-Hand-Teleskopgriff	340-465	65 kg	14002 22 S
2-Hand-Teleskopgriff	440-565	65 kg	14002 23 S
2-Hand-Teleskopgriff	665-790	60 kg	14002 24 S

Die Mobeli Haltegriffe sind konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



MOBELI®

Saugteller
Die innere Verzahnung von Saugteller und Saugkopf führt zu einer erheblich höheren Haltekraft. Die aus speziellem Gummi gefertigten Saugteller halten sogar auf leicht strukturierten Bad- und WC-Fliesenflächen.



Teleskopgriff

Damit Sie den Haltegriff unabhängig vom Fliesenformat anbringen können, haben wir diesen Teleskopgriff entwickelt. Die Griffe sind aus einem extrem hochschlagfesten und zähen Kunststoff.

Schnellverriegler

Alle Mobeli Haltegriffe können ohne Werkzeug problemlos montiert und für die Reise leicht zerlegt werden. Wie alle Metallteile des Systems Mobeli ist der Schnellverriegler aus Edelstahl gefertigt.

Sicherheitsanzeige

Die neueste Innovation der Mobeli Haltegriffe ist schlicht revolutionär. Denn wir präsentieren Ihnen eine Weltneuheit: **Der erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand - und damit die Haftkraft - gemessen wird.** Denn die Mobeli Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die Warn-Wippe im Hebel versenkt, stimmt die Haftkraft und der Griff ist voll belastbar. Fährt die Warn-Wippe aus und der rote Wippenrand wird sichtbar, muss der Mobeli Haltegriff gelöst und erneut angesaugt werden. Auch geeignet für Personen mit Sehschwäche, denn die Warn-Wippe ist bei Vakuumverlust gut tastbar.

Wichtiger Hinweis: Die mobilen Haltegriffe sind mit und ohne Sicherheitsanzeige erhältlich. Wenn Sie Haltegriffe ohne Sicherheitsanzeige möchten, lassen Sie bitte bei der Bestellung das S der Best. Nr. wegfallen.

3


4

Sicherheitsanzeige


Mobil und sicher. Denn Sicherheit geht vor.

Mobeli ist das Original unter den mobilen Haltegriffen. Unsere Produktfamilie wird ständig weiterentwickelt. Alle Haltegriffe des Systems Mobeli aus dem traditionsreichen Unternehmen ROTH, unterliegen der Fertigungsüberwachung des TÜV-Süd und werden in Deutschland entwickelt und gefertigt.

Funktionsweise der Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüft.

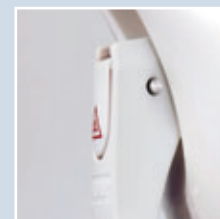

Die volle Belastbarkeit. Angegebene Nennlast mit 1,5 facher Sicherheitszugabe (z.B. 70 kg = 105 kg).

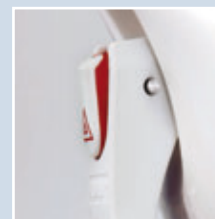

Ca. 100% Belastbarkeit. Angegebene Nennlast ohne Sicherheitspuffer. Achtung: Jetzt erneut befestigen!



Achtung: Alarmstufe ROT. Das Vakuum des Haltegriffs ist verbraucht. Griff fällt ab. Sofort neu befestigen!

Reisefreudig. Unsere mobilen Haltegriffe lassen sich einfach zerlegen. Sie benötigen nur wenig Platz in Ihrem Gepäck, sind am Reiseziel schnell wieder zusammensteckt und dann sofort einsatzbereit - ohne Werkzeug.

Vielseitig und erweiterbar. Das System Mobeli hat eine Lösung für nahezu jede Aufgabenstellung. Fragen Sie unser Expertenteam oder im kompetenten Fachhandel nach.



5

Mobilitätshilfen

Mehr Mobilität. Zuhause und Unterwegs.

Hochlast-Variante: Der mobile Vakuum-Haltegriff QuattroPlus kann an der Wand, über Eck oder als horizontale Trainings-Greifstange verwendet werden.

Durch die serienmäßig integrierten Kreuz-Gelenke kann der QuattroPlus einfach am Türrahmen befestigt werden. Seine 4 Saugteller erhöhen die Nennlast auf bis zu 125 kg.

Diagonalgelenkadapter ermöglichen es, den QuattroPlus in nahezu allen Richtungen zu befestigen. Weiteres Plus: Der Hochlast-Griff lässt sich mit anderen Komponenten des Systems Mobeli beliebig erweitern und sogar zur Reelingstrecke ausbauen.



MOBELI®	Greiflänge mm	Nennlast	Best. Nr.
QuattroPlus	200-325	125 kg	14002 41 S
QuattroPlus	320-445	125 kg	14002 42 S
QuattroPlus	420-545	110 kg	14002 43 S
QuattroPlus	645-770	110 kg	14002 44 S

6



Praktisch und komfortabel. Der stufenlos positionierbare Wannverkürzer verhindert ein Abtauchen in der Badewanne. Er eignet sich aber ebenso gut als Tablett direkt an der Badewanne.

Stabilisationsgriffe. Sie möchten eine Hilfe, die Ihre Hand stabilisiert: Mobeli Stabi - in 2 Varianten. Er kann schnell und einfach auf allen porenichtigen Flächen wie lackiertem Holz, Kunststoff oder Metall befestigt werden.

Der Stabi Horizontal stabilisiert in der Horizontalen; Stabi Vario kann wahlweise vertikal, horizontal oder im 45°-Winkel nach links oder rechts geschwenkt werden.



MOBELI®	Wannenbreite mm	Best. Nr.
Wannenverkürzer (2 Saugteller)	ab 510	14002 81 S
Wannenverkürzer (3 Saugteller)	510-700	14002 82 S

	Durchmesser Griff mm	Nennlast	Best. Nr.
Stabi Horizontal	31	15 kg	14002 95 S
Stabi Vario	31	15 kg	14002 96 S

7